

Förbättrar patientens livskvalitet. Gör livet lättare för doktorn.

## Vi inför en enkel lösning

KIMBERLY-CLARK\* MIC\*, MIC-KEY\* inläggningssatser innehåller verktyg och komponenter särskilt designade för att underlätta initial inläggning av en rad olika Kimberly-Clark MIC\* och MIC-KEY\* enterala matningssonder.

### Lätt att använda

- En praktisk sats
- Unikt designade komponenter
- En rad olika satser tillgängliga för initial inläggning av MIC\* och MIC-KEY\* enterala matningssonder med fasthållningsballong från 12 Fr till 20 Fr

### Besparingsmöjligheter för sjukhuset

- Elimineras behovet för traditionell PEG-inläggning och -borttagning på specifika kliniska indikationer
- Elimineras behovet för suturtagning

### Förbättrad patientkomfort

- En procedur istället för två (vid ersättning av traditionell PEG-inläggning)
- Minimerad infektionsrisk tack vare resorberbar sutur och T-fäste-suturlås som är lätt att rengöra




MIC\* G



MIC-KEY\* G



MIC\* J/TJ

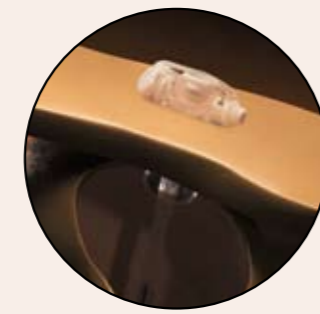

MIC-KEY\* J/TJ

# Satsernas användningsområden

Användningsområde för MIC\*, MIC-KEY\* inläggningssats:

French-storlek	Sats för MIC*-G	Sats för MIC-KEY*-G	Sats för MIC*-J/ TJ	Sats för MIC-KEY* -J/ TJ
12 Fr	98420	98430		
14 Fr	98421	98431		
16 Fr	98422	98432	98435	98437
18 Fr	98423	98433	98436	98438
20 Fr	98424	98434		

# Satsens innehåll

	MIC*-G Inläggningssats	MIC-KEY*-G Inläggningssats	MIC*-J/ TJ Inläggningssats	MIC-KEY* -J/ TJ Inläggningssats
SAF-T-PEXY* T-fästen	X	X	X	X
Spruta 12 mL	X	X	X	X
Kärklämmare	X	X	X	X
Säkerhetsintroducernål	X	X	X	X
Ledare med J-spets		X	X	
Skalpell	X	X	X	X
Seriell dilatator med isärdragbar hylsa	X	X	X	X
Stomimätare		X		X
Kateter införd över ledare			X	X
Spruta 12 mL		X		X

Webbsida för infektionsskydd:

[www.HAIwatch.com](http://www.HAIwatch.com)



Webbsida för patientsupport:

[www.Mic-Key.com](http://www.Mic-Key.com)

Lokal distributör:

För ytterligare information, ring till Kimberly-Clark Europa – Mellanöstern – Afrika: +32(0)2 7112600, eller besök vår webbsida på [www.khealthcare.com](http://www.khealthcare.com).

<sup>1</sup> Biosyn™ är ett registrerat varumärke som tillhör United States Surgical Corporation.  
\* Registrerat varumärke eller varumärke som tillhör Kimberly-Clark Worldwide, Inc.  
© 2008 KCWW. Alla rättigheter förbehålles. H00783

H0XXXX-XXX\_SE

Vår affärsidé vid Kimberly-Clark är att leverera kliniska lösningar som uppfyller era krav i en föränderlig värld. Oavsett om det gäller lösningar inom kirurgi eller mag-tarmområdet eller förebyggande av sjukhusförvärvade infektioner har du med Kimberly-Clarks produkter alltid ett problem mindre du behöver oroa dig över.



Lösningar på problemet med sjukvårdsförvärvade infektioner



Kirurgiska lösningar



Lösningar inom gastroenterologi / magsmältningsområdet

 Kimberly-Clark

Trusted Clinical Solutions\*



KIMBERLY-CLARK\* MIC\*, MIC-KEY\*  
Inläggningssatser



Initial inläggning.  
Helt enkelt nydefinierad.

 Kimberly-Clark

Trusted Clinical Solutions\*

# Initial inläggning

## startar här.


## Satsens innehåll

### Seriell dilatator med isärdragbar hylsa

- Slät och konformad för att minimera vävnadstrauma
- Inbyggd isärdragbar hylsa för att öka procedurens effektivitet
- En dilatator i varje sats för att underlätta korrekt dilatation av stomat

### Saf-T-Pexy\* T-fästen


- Förladdade
  - ingen extra manipulering
- Användarvänliga
- Engångs:
  - minimerar infektionsrisken
- Resorberbar 3/0 Biosyn™<sup>1</sup>-suture:
  - inget återbesök för suturtagning
- Låsande suturlås av polyuretan
  - fäster ventrikeln mot främre bukväggen

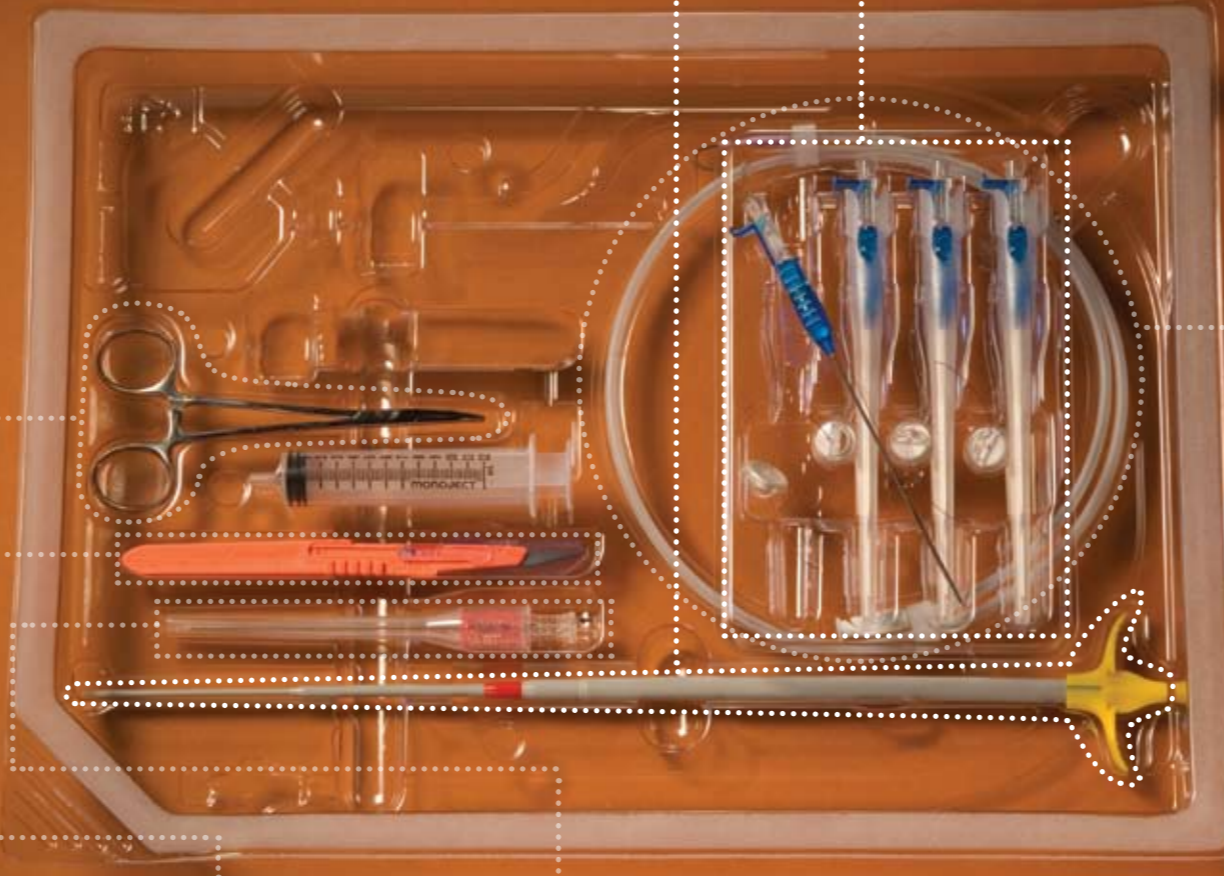

### Stomimätare för införing över ledaren

- Ger noggrannare mätning av stomikanalens längd för förbättrad passning, komfort och säkerhet
- Röntgentät för att synas vid genomlysning

*(Endast i MIC-KEY\* G och MIC-KEY\* J/TJ inläggningssatser)*

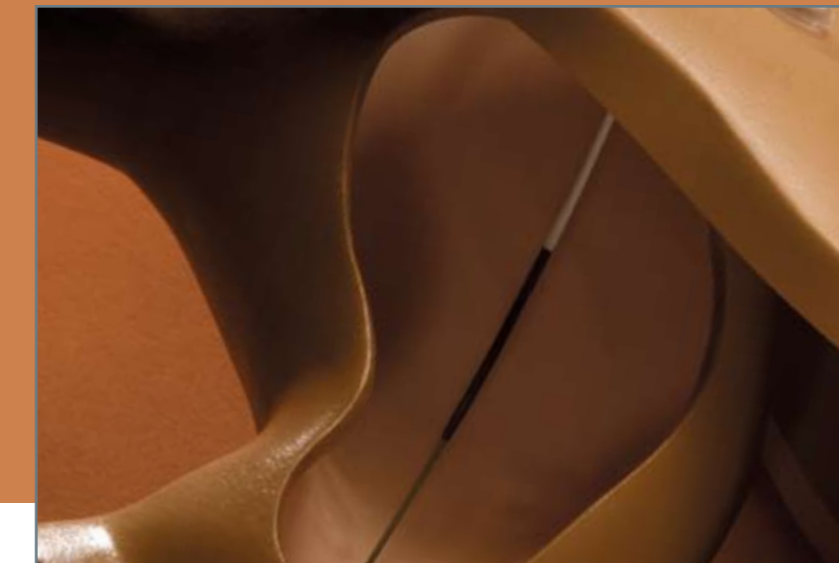

### Kateter införd över ledaren

- Underlättar manipulering av ledaren genom pylorus och framföring av ledaren förbi Treitz ligament

*(Endast i MIC\* J/TJ och MIC-KEY\* J/TJ inläggningssatser)*

### Kärklämmare

- För att sluta T-fästesuturlåset

### Säkerhetsskalpell

- Avsedd för att lägga en liten hudincision genom den subkutana vävnaden och fascian

### Säkerhetsintroducernål

- Avsedd för punktion av ventrikeln för införing av J-spets-ledaren
- Säkerhetskrage för att skydda mot accidentella nålstick

### Ledare

- För att upprätthålla åtkomst och underlätta dilatation
- J-spets för att förhindra perforation av den motsatta ventrikelväggen

## Fördelar

### MIC\*, MIC-KEY\* inläggningssats jämförd med traditionell PEG

- Ingen sondpassage genom munnen
- Enklare initial inläggning av matningssonder med fasthållningsballong
- Besparingar för sjukhuset
- Bekvämare för patienten

### MIC\*, MIC-KEY\* inläggningssats jämförd med nuvarande PRG-förfaranden

- Förladdad Saf-T-Pexy-nål med användarutlöst T-stång ger förenklad användning
- Korrekt fisteldilatation förhindrar läckage av magsaft
- Minimerar infektionsrisken